

Gardez la pêche...
stimulez vos yeux!



Verre Unifocal
**proactif contre
la fatigue**



Ophtalmic
VISION

Dans une société tertiaire et électronique, nos yeux sont de plus en plus sollicités et forcés à un effort d'accommodation constant. Plusieurs facteurs sont en cause, notamment l'utilisation quotidienne de smartphones et tablettes, mais également un temps de travail sur écran de plus en plus long. Il en résulte une fatigue visuelle dont souffre un nombre croissant de personnes, porteurs ou non de lunettes.

La solution ? **OSV ENERGIE!**

OSV Energie apporte une solution optique et physiologique à la fatigue visuelle chez les jeunes adultes. Ce verre unifocal à destination des 20-45 ans, conçu à partir des dernières technologies numériques, améliore la qualité des images observées ; l'acuité visuelle est affinée et la perception des contrastes optimisée. De plus, les verres OSV Energie apportent un soutien visuel qui soulage l'accommodation, notamment lors du travail sur écran. Les yeux se fatiguent moins, le porteur peut travailler plus longtemps et plus confortablement.

Haute Résolution et contraste accentué

OSV Energie est conçu à partir des dernières technologies numériques. Contrairement à un verre standard, sa surface **Haute Résolution** améliore la vision dans toutes les directions du regard.



- ✓ La surface atorique **Haute Résolution** réduit les aberrations latérales
- ✓ La vision est plus nette dans toutes les directions du regard
- ✓ L'amélioration de l'acuité et du contraste allège le travail de mise au point.
- ✓ Idéal pour le travail sur écran



Soutien à l'accommodation

Les verres **OSV Energie** apportent un soutien visuel qui soulage l'effort d'accommodation naturellement pratiqué par l'œil en vision rapprochée.

- ✓ Le design Proactif offre une zone d'addition sans générer d'aberrations perceptibles
- ✓ L'addition de 0.50 D facilite la convergence et soulage l'effort d'accommodation
- ✓ **OSV Energie** permet de travailler plus longtemps et plus confortablement

EN BREF

Unifocal Freeform
atorique face arrière

Verre proactif

Antireflet
systématique

10 matériaux

Quels sont les bénéfices d'OSV Energie ?

POUR L'OPTICIEN

- ✓ Apporter une solution à la fatigue visuelle
- ✓ Proposer un verre technologiquement avancé
- ✓ Avoir une image qualitative et professionnelle
- ✓ Satisfaire des porteurs de plus en plus connectés

POUR LE PORTEUR

- ✓ Qualité de vision supérieure
- ✓ Moins de fatigue visuelle
- ✓ Meilleur confort sur écran
- ✓ Possibilité de travailler plus longtemps

À qui s'adressent les verres OSV Energie ?

- ✓ Aux porteurs entre 20 et 45 ans
- ✓ Aux personnes travaillant beaucoup sur écran ou soumis à des efforts d'accommodation constants
- ✓ Aux personnes ayant un trouble visuel non ou mal corrigé



La gamme et gravures

OSV ENERGIE	MATIÈRE	REPÉRAGE AXIAL	SIGLE NASAL	SIGLE TEMPORAL	INDICE	GAMME DE PUISSANCES
OSV Energie 174	Organique	O O	O E~	O n74	1.74	-12.00 à +10.00 cyl max +4.00
OSV Energie 174 Cozylens	Organique	O O	O E~	O n74	1.74	-12.00 à +10.00 cyl max +4.00
OSV Energie 167	Organique	O O	O E~	O n67	1.67	-11.00 à +10.00 cyl max +4.00
OSV Energie 167 Cozylens	Organique	O O	O E~	O n67	1.67	-11.00 à +10.00 cyl max +4.00
OSV Energie 160	Organique	O O	O E~	O n60	1.60	-10.00 à +10.00 cyl max +4.00
OSV Energie 160 Cozylens	Organique	O O	O E~	O n60	1.60	-10.00 à +8.00 cyl max +4.00
OSV Energie Poly	Polycarbonate	O O	O E~	O n59	1.59	-10.00 à +8.00 cyl max +4.00
OSV Energie 150	Organique	O O	O E~	O n50	1.50	-8.00 à +8.00 cyl max +4.00
OSV Energie 150 Cozylens	Organique	O O	O E~	O n50	1.50	-8.00 à +8.00 cyl max +4.00
OSV Energie 150 Transitions VII / XTRActive	Organique	O O	O E~	O n50	1.50	-8.00 à +8.00 cyl max +4.00

Garantie et carte porteur

Les verres OSV Energie sont systématiquement traités antireflet (PCC2 UV, PCC2, Phasium ou Blufence UV) garantis 2 à 3 ans.

Ils sont livrés avec un certificat d'authenticité garantissant leur origine et indiquant les paramètres de l'équipement.



Comment commander les verres OSV Energie ?

La commande de verres OSV Energie se fait à partir du site de commandes en ligne :

Webst^Ore
VISION

Rendez-vous sur www.ophtalmic-espace.fr






Info montage

Pour garantir la performance des verres **OSV ENERGIE**, le centrage doit être précis. Les verres **OSV ENERGIE** doivent être montés selon la règle de ponctualité, afin que l'axe optique du verre passe par le centre de rotation de l'oeil.

- **Centrage horizontal** : Ecart VL (même pour un usage en vision de près)
- **Centrage vertical** : Il doit s'effectuer quelques millimètres en dessous de la pupille

- **Méthode 1** : Prise de mesures selon le schéma ci-dessous

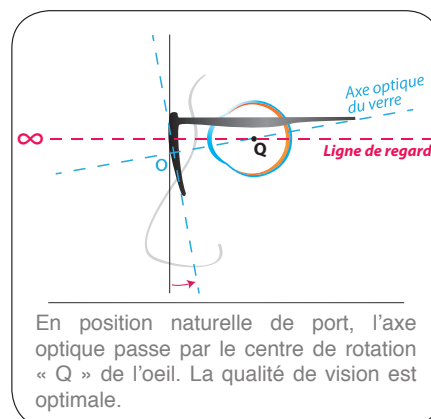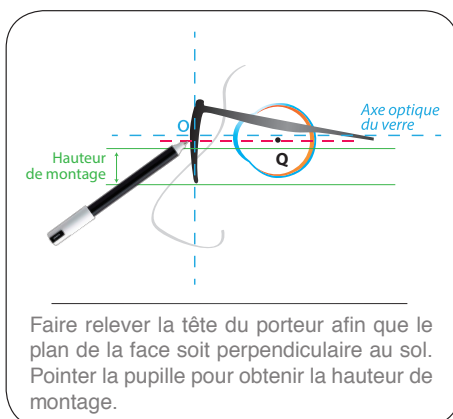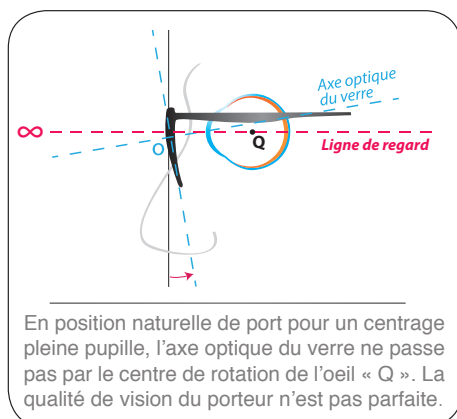

- **Méthode 2** : Décentrer le centre optique de 0.5 mm en dessous de la pupille par degré d'inclinaison soit 4 mm en dessous pour un angle pantoscopique standard de 8°

INFORMATIONS ET COMMANDES

Tél.

0 820 040 142

Service 0,12 € / min
+ prix appel

Technique

0 800 800 442

Service & appel
gratuits

Internet

Webst^Ore
VISION

via www.ophtalmic-espace.fr

Ophtalmic
VISION
www.ophtalmic-compagnie.fr